


Model AC127

Monitor pohybu a zvuku

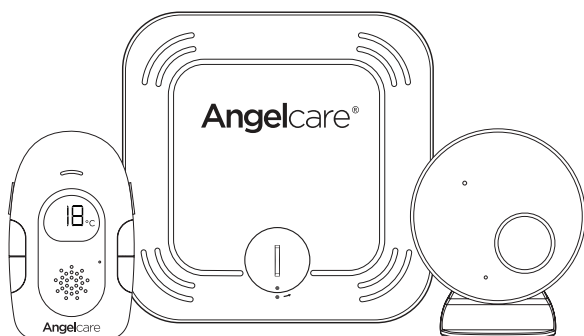

⚠ UPOZORNĚNÍ

Uschovejte uživatelskou příručku pro budoucí použití. Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtete varování a bezpečnostní pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt nebo poškození produktu.

DŮLEŽITÉ – ÚČEL POUŽITÍ

Tento produkt NENÍ určen a neměl by se používat k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). Tento produkt NENÍ určen k diagnostikování, léčbě, zmírnění, vyléčení nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo stavu.

Jedná se o produkt, který sleduje pohyb zdravých dětí a nenahrazuje rodičovskou péči.

Tento chůvička je v souladu se všemi příslušnými normami týkajícími se elektromagnetických polí a je při používání popsán v uživatelské příručce bezpečná

VAROVÁNÍ

1. Vzhledem k vážnému riziku uškrcení kojenců a batolat by si rodiče a pečovatelé měli vzít na vědomí následující varování:



VAROVÁNÍ - Nebezpečí uškrcení – Děti se mohou uškrtit kabely

- Používejte chůvičku a napájecí kabely mimo dosah dětí, alespoň ve vzdálenosti více než 1 metr
- **NIKDY** neprodlužujte kabely adaptérů. Používejte **POUZE** adaptéry.
- Tento produkt **NENÍ** hračkou. **NIKDY** nedovolte dětem, aby si s tím hrály

2.

UPOZORNĚNÍ - SENZOR POHYBU NEALARMUJE

- Senzorová podložka detekuje jiné zdroje vibrací a pohybu, než vaše dítě a narušuje provoz vašeho monitoru Angelcare.
- Alarm nezazní, pokud detekuje jiný pohyb, než vašeho dítěte
- Nastavení vysoké citlivosti může zachytit další zdroje vibrací a pohybů - přečtěte si prosím pokyny k nastavení citlivosti a podle toho citlivost upravte
- Další aktivní a starší děti (batolata) ve stejné místnosti mohou být detekovány a alarm nebude znít
- Zajistěte, aby prostředí dítěte nebylo při používání senzoru pohybu ovlivněno cizími vibracemi viz opatření popsané v bodech 3 až 11

3. NEPOUŽÍVEJTE dětskou postýlku a jiné příslušenství pro dětské postýlky, které by mohlo způsobit pohyby nebo vibrace

4. Ventilátory (včetně stropu), pračky, podlahové desky, ústřední topení nebo hlasitá hudba jsou všechny formy pohybu a vibrací a mohou rušit a být detekovány senzorovou podložkou

5. Pokud je přidána další mateřská jednotka, musí být umístěna nejméně 2 metry od mateřské jednotky 1 a senzorové podložky, protože by to mohlo narušit výkon

6. NEPOUŽÍVEJTE dětskou postýlku, která se dotýká postele rodičů / pečovatelů, protože senzorová podložka detekuje cizí pohyby

7. NEUMÍSŤUJTE dětskou postýlku na pružné konstrukce, mohly by být detekovány vibrace

8. Po vyjmutí dítěte z postýlky mohou některé matrace vytvářet vibrace, protože se vrací do původního tvaru a alarm nemusí hned zaznít

9. Zajistěte, aby dětská postýlka byla stabilní a

eliminována jakýkoli pohyb

10. Dětská postýlka by neměla být umístěna v dosahu jiné postýlky nebo postele

11. NEPOUŽÍVEJTE jiná bezdrátová zařízení ve stejné místnosti jako monitor (včetně mobilních telefonů, mikrovlnných ...). Mohou rušit signál a výkon

12. Podložka senzoru je vyrobena z plastu a neumožňuje cirkulaci vzduchu. Proto se pod matrací v oblasti podložky Sensor Pad může vyvinout plíseň. Doporučujeme matraci pravidelně otáčet a větrat / sušit, aby se zabránilo plísním. **Vyhnete se kontaktu s vlhkostí.** Vyčistěte - otřete suchým hadříkem, který nepouští vlákna

13. Senzorová podložka není vhodná pro použití ve věku nad 24 měsíců

14. Tento produkt nemůže nahradit odpovědný dozor dospělých

- Tento produkt je určen k monitorování vašeho dítěte. Při používání monitoru musíte stále zajistit dozor nezbytný pro trvalou bezpečnost vašeho dítěte.

Tento spotřebič používejte POUZE k účelu použití, jak je popsáno v této příručce.

15. Senzorová podložka není určena ke zjištění, zda je dítě mimo postýlku
16. VŽDY nezapomeňte ihned zkontrolovat dítě, kdykoli zazní alarm
17. Kabely uchovávejte mimo dosah všech dětí
18. Používejte POUZE nabíječky a napájecí adaptéry, které jsou součástí dodávky. Nepoužívejte jiné typy, protože by to mohlo poškodit zařízení a baterii (pokud je součástí vašeho modelu)
19. Je vyžadována montáž dospělými. Při montáži držte malé části mimo dosah dětí
20. Řiďte se pokyny a vyzkoušejte tento monitor a jeho funkce, abyste se s ním seznámili před skutečným použitím. VŽDY se ujistěte, že vysílač i přijímač správně pracují a jsou vzájemně v dosahu - pravidelně a při změně umístění chůvičky zkontrolujte
21. NEDOTÝKEJTE se kontaktů zástrčky, zejména ostrými nebo kovovými předměty
22. NEPOUŽÍVEJTE dětskou chůvičku v blízkosti vody. Dbejte na to, aby předměty NEPADALY na jednotku a aby nedošlo k vniknutí tekutin do jednotky, ani do senzorové podložky, skrz její otvory.



23. Monitor udržujte MIMO zdroje tepla (jako jsou kamna, radiátory atd.). Teplo může poškodit skříň nebo elektrické součásti
24. VŽDY položte dětskou jednotku i rodičovskou jednotku na rovný pevný povrch ve svislé poloze, která umožňuje správnou VENTILACI. NEPOKLÁDEJTE na pohovky, polštáře, postele atd., které by mohly blokovat ventilaci, nebo kdekoli, které by tlumily zvuk nebo narušovaly normální proudění vzduchu.
25. Chůvičky lze používat pouze mezi 10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F)

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE

26. VŽDY uchovávejte baterie mimo dosah dětí
27. Rodičovská jednotka používá vyměnitelnou dobíjecí Nikl-Metal-Hybrid baterii. Podložka Sensor Pad používá vyměnitelnou lithiovou baterii (knoflíkovou). Používejte pouze náhradní baterii doporučenou Angelcare (viz technická specifikace)
 - Při použití nesprávné baterie nebo nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu. Správnou instalaci baterie najdete v Uživatelské příručce
 - NIKDY nezkratujte napájecí svorky (kontakty)
28. NEKOMBINUJTE staré a nové baterie a používejte pouze náhradní baterie doporučené

společností Angelcare (viz technická specifikace)

29. Společnost Angelcare může způsobit vnitřní popáleniny chemikálií již za dvě hodiny a věst ke smrti. Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte MIMO DOSAH dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny uvnitř těla, vyhledejte lékařskou pomoc.
 30. Malá Knoflíková baterie představuje nebezpečí udušení - Uchovávejte mimo dosah dětí!
 31. Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní, abyste baterie nezkratovali vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky a klíče
 32. Zabraňte přebíjení, zkratování, zpětnému nabíjení, mrzačení nebo spalování baterií, aby se zabránilo jednomu nebo více z následujících případů: uvolňování toxických materiálů a plynů, uvolňování vodíku a / nebo kyslíku a zvýšení povrchové teploty
 33. NEPOKOUŠEJTE se dobíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení Baterie mohou vytéci korozivní elektrolyty nebo explodovat
 34. Nesprávně vložené baterie opačnou polaritou, mohou způsobit zpětné nabíjení, což může vést k úniku elektrolytu, nebo explozi.
 35. Pokud skladujete produkt déle než 30 dnů, vyjměte z jednotek baterie, protože by mohly vytéci a poškodit produkt
 36. Zlikvidujte „mrtvé“ baterie co nejdříve, protože „mrtvé“ baterie ve výrobku pravděpodobně vytečou. Pokud baterie vytekl, nebo došlo k jejich odvětrání, produkt zlikvidujte odpovědně
 37. NEUCHOVÁVEJTE tento produkt ani baterie dodané nebo určené k použití s tímto produktem v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí a nevystavujte se přímému slunečnímu záření
- ## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
38. Snímací podložka – Sensor Pad –
 - Pokud vaše postýlka nemá pevný, stacionární, zcela rovný, pevný povrch včetně pružinové nebo lamelové základny, vložte tvrdou desku mezi základnu postýlky a podložku senzoru, abyste zajistili správnou funkci (viz specifikace v KROKU 2).
 - Senzorová podložka funguje se standardními matracemi s pružinovou matrací a pěnovými matracemi a bez paměťové pěny (částečně nebo plně), matrací s dutým rámem a vodních lůžek. Pokud si nejste jisti kompatibilitou matrace, poraďte se s Angelcare
 39. Tento monitor používá veřejné vysílací vlny k přenosu signálů. Rodičovská jednotka může zachytávat signály nebo rušení od jiných monitorovacích zařízení ve vaší oblasti. Váš monitor může být dokonce přijímán jinými domácími. Chcete-li chránit své soukromí, ujistěte se, že obě jednotky jsou vypnuty, když se nepoužívají
 40. Ochrana napájecí šňůry - Chraňte napájecí kabel adaptéru před šlápnutím nebo sevrutím nábytkem nebo jinými předměty - Napájecí šňůry by

měly být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo, nebo aby se nepřiskříply či nezlomily, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost místům, kde vystupují z produktu. Zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Nezapomeňte zapojit adaptér do zásuvky nejbližší k zařízení a to je snadno přístupné. Chcete-li se odpojit od sítě, odpojte adaptér

41. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly určené výrobcem. Jakákoli montáž produktu by se měla řídit pokyny výrobce

- NEPOKLÁDEJTE tento produkt na nestabilní plochu, stojan, stativ, držák nebo stůl. Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělého a vážné poškození produktu
- Používejte POUZE stojánek prodáváný s výrobkem
- Ujistěte se, že náhradní díly jsou dodávány společností Angelcare a mají stejné vlastnosti jako originální díly. Neoprávněné nahrazení může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo požár

42. Odpojte toto zařízení během bouřky nebo pokud se nepoužívá po dlouhou dobu

43. Údržba - NEPOKOUŠEJTE se opravovat tento produkt sami, protože otevření nebo odstranění krytů (kromě dvířek baterie) může vystavit nebezpečné napětí nebo jiná nebezpečí

44. Přetížení - NEPŘETĚŽUJTE zásuvky ve zdi, prodlužovací šňůry nebo integrované zásuvky, protože to může vést k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem


45. Anténa Dětské jednotky - Anténa použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby byla zajištěna vzdálenost od všech osob nejméně 20 cm (20 cm) a nesmí být umístěna nebo provozována ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

46. Čištění - Před čištěním odpojte všechny jednotky. NIKDY neponořujte žádnou část monitoru do vody. Čištěte pouze suchým hadříkem

POŽADAVKY NASTAVENÍ


CO JE V KRABICI

- 1 Rodičovská jednotka
- 2 Dětská jednotka
- 3 Stojánek (pro Dětskou j.)
- 4 Snímací podložka (senzor)
- 5 CR2450 Baterie (pro Snímací podložku)
- 6 2 x AC Adapter napájecí
- 7 2 x Dobíjecí AAA Baterie (pro Rodičovskou j.)

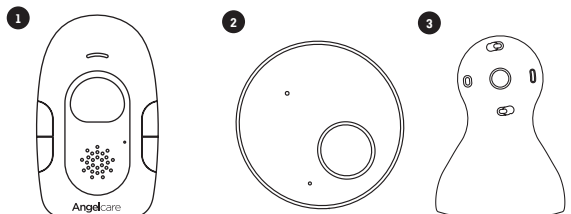


CO POTŘEBUJETE

- pevnou desku, pokud postýlka nemá pevný povrch (viz specifikace KROK 2)
- 2 x alkalické AAA záložní baterie (pro Dětskou jednotku)
- Šroubovák křížový

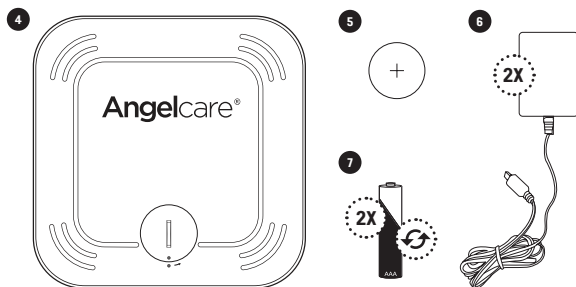


1- NASTAVENÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

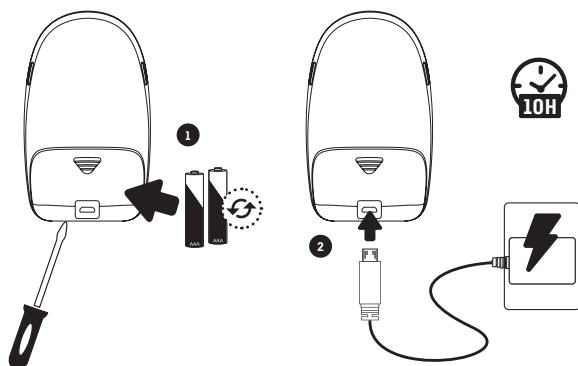


Nabijte Rodičovskou jednotku 10 hodin před prvním použitím (vypnutou)

Běžná doba nabíjení je 8 hodin

2- NASTAVENÍ SNÍMACÍ PODLOŽKY

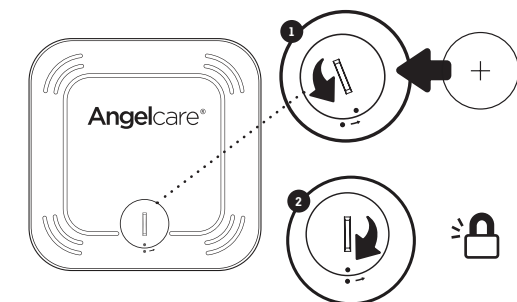

1. Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte baterii "+" nahoru
2. Nasad'te kryt baterie, zarovnejte 2 body a zajistěte jej kliknutím

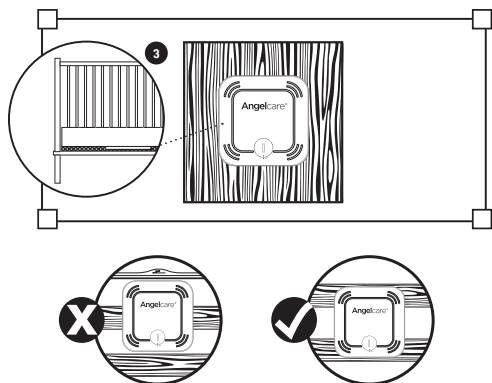


3. Vyměte matraci z dětské postýlky, umístěte senzor
- **Logo Angelcare® nahoru**
- na základnu v přibližném středu matrace. Pokud dno vaší dětské postýlky vyžaduje pevnou desku (viz část „DŮLEŽITÉ“ níže)
4. Matraci vraťte do postýlky

Správné umístění na lamelové základně




DŮLEŽITÉ

- Pokud vaše postýlka nemá pevný, stacionární, zcela rovný povrch, včetně pružinové nebo lamelové základny, vložte mezi základnu postýlky (dno) a podložku senzoru tvrdou desku, aby byla zajištěna správná funkce. Podpůrná deska (překližka, lamino) musí být větší, než senzor, tedy rozměry nejméně 30 x 30 cm, tl. 6 mm.
- Senzorová podložka funguje se standardními matracemi s pružinovou matrací a pěnovými matracemi, kromě paměťové pěny (částečné nebo plné), matrací s dutým rámem a vodních lůžek. Pokud si nejste jisti kompatibilitou matrace, poraďte se s Angelcare. Pevná podpůrná deska udržuje konstantní tlak na celou senzorovou podložku (senzor), což umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okraji postýlky.

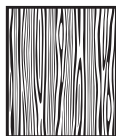


3- NASTAVENÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY (CHŮVIČKY)

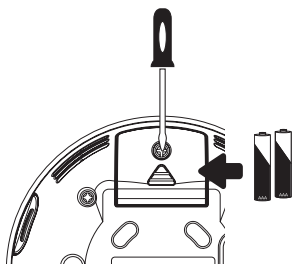

Poznámka:

- Alkalické baterie (nejsou součástí) jsou záložním zdrojem energie v případě výpadku napájení

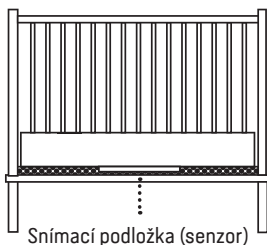


Chůvičku s kabelem
adapteru mějte alespoň
1 metr od postýlky




4- ZAPNUTÍ MONITORU

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

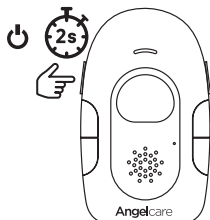


DĚTSKÁ JEDNOTKA

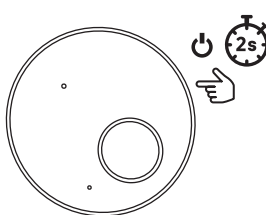

POZASTAVENÍ A RESTARTOVÁNÍ SENZOROVÉ PODLOŽKY

- Umožňuje pozastavit senzorovou podložku, pokud odeberete dítě z postýlky, např. pro krmení nebo uklidnění. Po vložení dítěte zpět do postýlky se ujistěte, že jste senzorovou podložku opět zapnuli

DĚTSKÁ JEDNOTKA

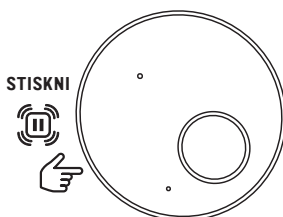

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA




Poznámka:

- Vaše Dětská a Rodičovská jednotka jsou již spárovány
- Pokaždé, když zapnete Dětskou jednotku, interní teploměr se bude kalibrovat, aby byla zajištěna přesnost. Tento automatický proces bude trvat přibližně 30 minut
- Na obrazovce Rodičovské jednotky bude blikat ikona "mimo dosah", dokud se nezobrazí ikony pokojové teploty a funkce. Proces připojení by měl být proveden do 30 sekund. Pokud tato sekvence není dokončena do 30 sekund, budete muset jednotky vypnout a začít znovu
- Pokud vypnete Dětskou jednotku, zazní alarm mimo dosah. Znovu zapnete Dětskou jednotku a znovu vytvoříte propojení

VYZKOUŠEJTE SENZOROVOU PODLOŽKU

1. Snímací podložka může detekovat jiné zdroje vibrací a pohybu, než vašeho dítěte a ovlivňuje výkon vašeho monitoru Angelcare. Alarm nebude znít, pokud senzor detekuje jiný pohyb, než vašeho dítěte
2. K dispozici jsou 3 nastavení citlivosti - nízká, střední a vysoká. Jednotka je nastavena na střední (výchozí) a lze ji odpovídajícím způsobem upravit
3. Pokud se dotknete dětské postýlky, senzor detekuje falešné pohyby
4. Nezachytí-li žádný pohyb po dobu 15 sekund, monitor vydá jedno stimulační pípnutí, které je určeno k vyvolání pohybu dítěte. Pokud není detekován žádný další pohyb, za 20 sekund se ozve hlavní poplach - série trvalých pípnutí

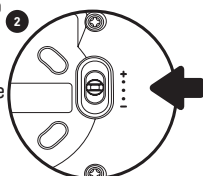

TEST SENZOROVÉ PODLOŽKY "ČTYŘI ROHY"

1. Umístěte senzorovou podložku do přibližného středu oblasti spánku dítěte a vložte matraci zpět na místo
2. Zapněte obě jednotky - zkontrolujte, zda jsou spolu spárované (připojené)
3. Klepejte rukou lehce a nepřetržitě na roh matrace, aby senzor detekoval pohyb. Pokud je detekován pohyb, uslyšíte zvuk "TIK" každých 5 sekund a Rodičovská jednotka bliká zeleně pro jednu snímací podložku
4. Odstupte od postýlky
5. Alarm zazní z dětské a rodičovské jednotky po 20 sekundách.
Pokud alarm nezní, zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zkuste to znovu; Zkontrolujte úroveň nabití baterie na všech jednotkách, postupujte podle kapitoly „ALARM NEZNÍ“ - Nastavení citlivosti může vyžadovat snížení o jednu úroveň kvůli zachytávání jiných vibrací / pohybů.
6. Pokud zazní ALARM, poklepejte rukou lehce na roh matrace, aby senzor detekoval pohyb. Rozpoznání pohybu a zastavení alarmu může trvat až 8 sekund.
7. Pokud alarm pokračuje, i když dvakrát lehce poklepete na roh matrace, upravte citlivost.






DŮLEŽITÉ

- Před prvním použitím monitor vyzkoušejte
- Před použitím a pravidelně (před umístěním dítěte do dětské postýlky) vždy zkontrolujte, zda senzorová podložka nezachytává ve svém okolí žádné cizí pohyby, ani vibrace.
- Vyzkoušejte svůj monitor pokaždé, když přesunete senzorovou podložku na jiné místo


5- SEZNÁMENÍ S MONITOREM

DĚTSKÁ JEDNOTKA

- 1 Indikátor napájení
/ Indikátor slabé baterie
- 2 Mikrofon
- 3 Indikátor senzoru pohybu / Indikátor teploty
- 4 Prstencový Indikátor teploty ZAPNUTO / VYPNUTO / Pager (k vyhledání Rodičovské jednotky - stiskněte a podržte).
- 5 Reprodaktor
- 6 Vypínač ON/OFF
- 7 Micro USB port
- 8 Nastavení citlivosti Snímací podložky
- 9 Pauza Snímací podložky
- 10 Bateriový prostor

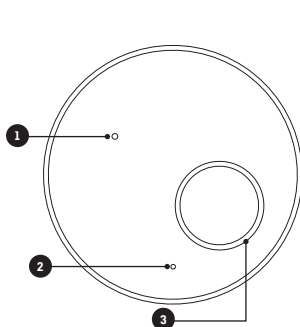



PŘEDNÍ STRANA

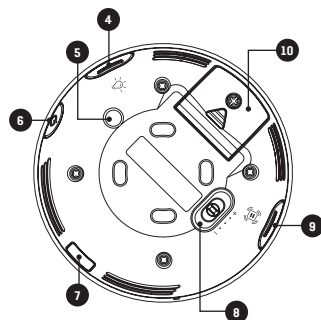

ZADNÍ STRANA


RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

- 1 Indikátor detekce pohybu "Tikání" (TIC)
- 2 Vypínač ON/OFF
- 3 Menu (stiskni a drž) / Exit menu
- 4 Potvrdí výběr, změni funkci
/ Pauza Snímací podlož (stiskni a drž)
- 5 Hovořit zpět (stiskni a drž pro mluvení)
- 6 Hlasitost + / NAHORU
- 7 Hlasitost - (v MUTE modu bude ikona zvuku blikat a Rodičovská jednotka zobrazí LO) / DOLŮ
- 8 Prostor dobíjecích baterií
- 9 Micro USB dobíjení

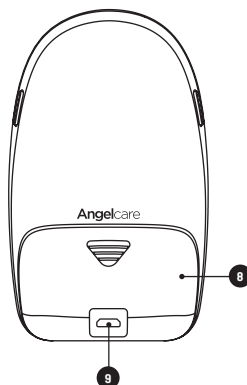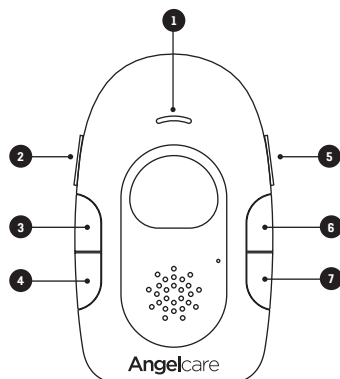

IKONY RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

- 1 Teplota
- 2 Teplotní alarm
- 3 Režimy detekce
- 4 Viditelný zvuk - stupnice
- 5 Kvalita příjmu
- 6 Stav baterií Rodičovské jednotky
- 7 VOX indikátor
- 8 Teplota zobrazena v Celsius / Fahrenheit

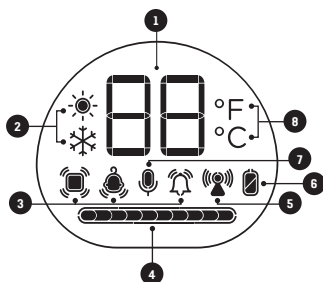

FUNKCE MONITORU



Poznámka:

- Nastavení je dostupné stisknutím a podržením tlačítka MENU ≡ na Rodičovské jednotce
- Funkce MENU jsou ve smyčce. Při každém krátkém stisknutí tlačítka OK přejdete na další funkci nabídky

Aktivace/Deaktivace detekce pohybu



Snímací podložka - Senzor spustí alarm, pokud po 20 sekundách nezachytí ŽÁDNÝ pohyb. Reproductory Rodičovské i Dětské jednotky budou vydávat hlasité, po sobě jdoucí zvuky - alarm pohybu.

Když je vaše dítě starší, můžete vypnout detekci pohybu a používat monitor pouze pro zvuk.



Aktivace/Deaktivace TIC funkce (tikání při pohybu)

Pokud je aktivována detekce pohybu, umožňuje vám každých 5 sekund slyšet zvuk Tic



Aktivace/Deaktivace zvuku (přenosu z chůvičky)

Umožňuje používat monitor pouze pro detekci pohybu



Nastavení VOX funkce

Aktivace zvukem (VOX ON): Znamená to, že bude přenášet zvuky, pouze pokud je detekuje, na základě nastavení úrovně citlivosti. Z důvodu úspory energie se přenos zvuku po 10 sekundách zastaví, pokud není detekován žádný zvuk. Jakmile je detekován zvuk, přenos se automaticky aktivuje



Nepřetržitý zvuk (VOX OFF): Znamená, že monitorování zvuku je nepřetržitě zapnuto a zachycuje všechny zvuky

Nastavení VOX citlivosti (pokud je VOX aktivovaný)

Citlivost mikrofону je nastavitelná (4 úrovně). To znamená, že zvuk se začne přenášet pouze na základě nastavené úrovně



Nastavení zobrazování stupňů Celsius nebo Fahrenheit

Aktivace/Deaktivace teplotního alarmu

Varuje, když teplota dosáhne maximální nebo minimální nastavené teploty



Nastavení alarmu nižší teploty (pokud je aktivován teplotní alarm)



Nastavení alarmu vyšší teploty (pokud je aktivován teplotní alarm)



DŮLEŽITÉ



- Všechny změny a úpravy provedené v hlavní nabídce se neuloží, dokud je nepotvrdíte stisknutím tlačítka EXIT
- V režimu MENU bude přenos zvuku mezi Rodičovskou a Dětskou jednotkou dočasně deaktivován



1 2 3



4 5



6 7 8 9



10 11 12



14 15

- 1 Detekce pohybu Snímací podložkou je aktivován
- 2 Zvuk je aktivován
- 3 "TIC" funkce tikání je aktivována
- 4 Aktivace zvukem (VOX ON) je aktivováno
- 5 Nepřetržitý zvuk (VOX OFF) je aktivováno

Kvalita příjmu:

- 6 Dobré spojení
- 7 Průměrné spojení
- 8 Slabé spojení
- 9 Bez spojení (Out-of-range)

Indikátory stavu baterie Rodičovské jednotky:

- 10 Plně nabitá
 - 11 1/2
 - 12 Vybitá
 - 13 Nabíjení
- Teplotní alarmy:
- 14 Příliš teplo
 - 15 Příliš chladno

6- UPOZORNĚNÍ

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

1 Pohybový alarm

- Pokud se po 15 sekundách nezjistí žádný pohyb, uslyšíte z Dětské jednotky jeden zvuk předběžného poplachu - stimulační alarm
- Pokud po dalších 5 sekundách nebude detekován žádný pohyb, reproduktory Rodičovské jednotky a Dětské jednotky budou vydávat hlasité po sobě jdoucí zvuky - jedná se o alarm pohybu
- Ikona Senzoru a úroveň zvuku na Rodičovské jednotce budou blikat

2 Out-of-range alarm


- Alarm se aktivuje, když vaše dvě jednotky nekomunikují
- Rodičovská jednotka vydá trojitě pípnutí každých 15 sekund
- Out-of-Range ikona bude blikat

3 Vybité baterie Rodičovské jednotky

- Rodičovská jednotka vydá 2 po sobě následující zvuky, každých 30 sekund a ikona vybité baterie bude blikat

4 Upozornění na teplotu

- Rodičovská jednotka vydá 3 po sobě následující zvuky, každých 5 sekund a ikona teploty bude blikat (sněhové vločky / slunce)

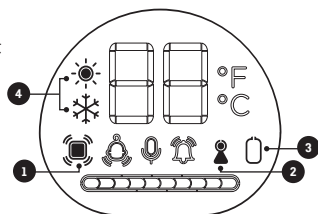

DĚTSKÁ JEDNOTKA

1 Napájení & Stav baterii

Svítil zelená: Monitor je aktivován

Bliká zelená: Dětská jednotka používá záložní baterie

Bliká žlutá: Baterie Dětské jednotky jsou vybité

2 Snímání pohybu & Teplotní indikátor

Bliká červeně: Není detekován pohyb

• Reprodukory Rodičovské jednotky i Dětské jednotky budou vydávat hlasitá nepřetržitá pípnutí - jedná se o alarm pohybu

Bliká bílá: Monitor má pauzu

• Rodičovská jednotka i Dětská jednotka vydávají každých 20 sekund jedno pípnutí

Bliká bledě modrá: Ztráta připojení mezi Dětskou jednotkou a senzorovou podložkou

• Reprodukory Rodičovské jednotky i Dětské jednotky budou vydávat hlasitá nepřetržitá pípnutí


Svítil červená: Teplota v místnosti je příliš horká

• Rodičovská jednotka vydá 3 po sobě jdoucí zvuky každých 5 sekund

Svítil modrá: Pokojová teplota je příliš nízká

• Rodičovská jednotka vydá 3 po sobě jdoucí zvuky každých 5 sekund

Svítil bílá: Pokojová teplota je příliš dobrá

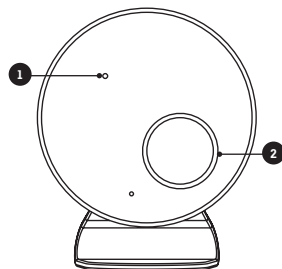

Poznámka:

Stisknutím libovolného tlačítka na Rodičovské jednotce zastavíte alarm, nebo stiskněte tlačítko Pause Sensor Pad na Dětské jednotce

Během pohybového alarmu je detekce pohybu pozastavena (Pauza). Chcete-li detekci pohybu znovu aktivovat, jednoduše stiskněte kterékoli tlačítko Rodičovské jednotky

7- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PÉČE O VAŠI DOBÍJECÍ BATERII

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou baterie plně nabitě - po dobu 10 hodin.
- Chcete-li zachovat maximální životnost baterie, doporučujeme vám baterie pravidelně vybíjet. Výkon baterie lze snížit ponecháním baterií neustále v nabíjení. Pokud vaše Rodičovská jednotka není používána, vypněte ji.
- Nedostatek energie baterie může zhoršit výkon monitoru. Pokud nejste spokojeni s výkonem své Rodičovské jednotky, vyměňte dobíjecí baterie (2 x NiMH dobíjecí baterie).
- Doporučujeme vyměnit baterie každých 6 měsíců.

ZTRÁTA PŘIPOJENÍ MEZI RODIČOVSKOU JEDNOTKOU A DĚTSKOU JEDNOTKOU

- V případě ztráty připojení je prvním krokem přiblížování Rodičovské a Dětské jednotky k sobě. Ujistěte se, že jsou obě jednotky zapnuté, aby se obnovilo spojení. Pokud po provedení výše uvedeného stále neexistuje žádné připojení a žádné varování mimo rozsah, mělo by být provedeno níže uvedené opětovné připojení.


1. Obě jednotky **Vypněte**

2. **Zapněte** Dětskou jednotku



3. Stiskněte **4 x** po sobě tlačítko Vypínače napájení Dětské jednotky



Kontrolka (kruh) Snímací podložky na Dětské jednotce rychle bliká zeleně (indikuje, že Dětská jednotka je v režimu připojování - párování)

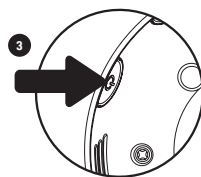

4. Zapněte Rodičovskou jednotku. Ikona Mimo-dosah (📶) bude blikat (označuje, že Dětská jednotka je v režimu připojování)
5. Stiskněte a držte tlačítko **Mluvit zpět** na Rodičovské jednotce, dokud nezazní zvukový signál
6. Stiskněte **OK** tl. na Rodičovské jednotce. Ikona Mimo dosah (📶) by měla blikat rychleji, což znamená, že Rodičovská jednotka je v režimu propojení

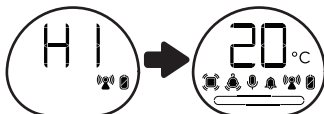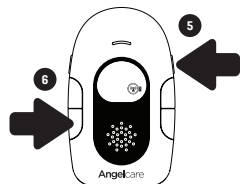


- Během procesu opětovného připojení zobrazí Rodičovská jednotka ikonu H1-H2
- Opětovné připojení je úspěšné, pokud Rodičovská jednotka zobrazuje běžné zobrazení

ZTRÁTA PŘIPOJENÍ MEZI SNÍMACÍ PODLOŽKOU A DĚTSKOU JEDNOTKOU

- V případě ztráty připojení je prvním krokem přiblížení Snímací podložky a Dětské jednotky. Ujistěte se, že jsou obě jednotky zapnuté, aby se obnovilo spojení. Pokud ani po provedení výše uvedeného neexistuje žádné připojení, měl by být proveden postup opětovného připojení níže. Během procesu opětovného připojení se ujistěte, že se ve stejné místnosti nenachází žádná jiná bezdrátová Snímací podložka.

1. **Vypněte** Dětskou jednotku a Rodičovskou jednotku
2. **Vyměňte** a vyměňte baterii ze Snímací podložky
3. Zapněte Dětskou jednotku stiskem Vypínače na 2 vteřiny

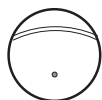


Indikace napájení Dětské jednotky se rozsvítí zeleně

4. Stiskněte a **podržte** tlačítko **Pause** na Dětské jednotce po dobu 3 sekund



MODRA

Kontrolka Snímací podložky na Dětské jednotce bude blikat modře

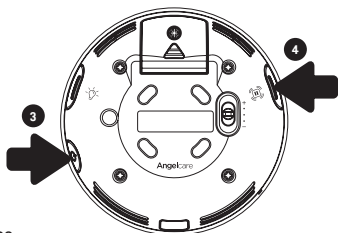

- Opětovné připojení by mělo být dokončeno do 30 sekund.
- Opětovné připojení je úspěšné, když Dětská jednotka vydá potvrzovací tón.

SNÍMACÍ PODLOŽKA POHYBU - NEALARMUJE

- Snímací podložka detekuje jiné zdroje vibrací a pohybu, než vašeho dítěte a alarm nebude znít.
- Viz Varování 3 až 11 a viz KROK 4, TEST SNÍMACÍ PODLOŽKY.

SNÍMACÍ PODLOŽKA POHYBU - FALEŠNÉ ALARMY (INDIKÁTOR BLIKÁ ČERVENĚ)

- Vyměňte baterii senzoru CR2450.
- Vypněte Dětskou jednotku.
- Falešné poplachu na Snímací podložce se mohou vyskytnout z několika důvodů. Vždy, když se ozve poplach, vždy okamžitě zkontrolujte dítě:
 - Po vyjmutí dítěte z dětské postýlky nebyla Dětská jednotka vypnuta
 - Ujistěte se, že mezi matrací a Snímací podložkou není povlečení, nebo dutina
 - Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matrací. Ujistěte se, že je na rovném pevném povrchu potíštěnou stranou nahoru
 - Může být také nutné upravit úroveň citlivosti
- Viz Varování 3 až 11 a viz KROK 4, TEST SNÍMACÍ PODLOŽKY

INDIKÁTOR ZAPNUTÍ NA DĚTSKÉ JEDNOTCE (ZELENÉ SVĚTLO) NESVÍTÍ

- Zkontrolujte připojení nebo přepojte do jiné elektrické zásuvky.
- Stisknutím tlačítka Vypínače Dětské jednotky na 2 sekundy Dětskou jednotku zapněte.

SLABÝ PŘÍJEM

- Přiblížte jednotky k sobě.
- Změňte polohu jedné nebo obou jednotek.
- Umístěte jednotky na rovnou plochu mimo dosah dítěte.
- Vyměňte baterie nebo nabijte Rodičovskou jednotku.

POKUD NESLYŠÍTE ZVUK

- Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapnuty.
- Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapojeny do funkčních elektrických zásuvek.
- Zkontrolujte baterie v obou jednotkách (v případě potřeby je vyměňte nebo dobijte).
- Přiblížte Rodičovskou jednotku blíže k Dětské jednotce.

PORUCHY, ZKRESLENÍ, VLIV JINÝCH MONITORŮ, BEZDRÁTOVÝCH TELEFONŮ, VYSÍLAČEK, ETC.)

- Otočte Rodičovskou jednotku, nebo ji přesuňte mimo zdroj rušení.

ZPĚTNÁ VAZBA (KVÍLIVÉ ZVUKY VYDÁVANÉ Z RODIČOVÉ JEDNOTKY)

- Přesuňte jednotky dál od sebe (nejméně 3 metry).
- Snižte hlasitost na Rodičovské jednotce.

DISPLEJ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY JE ČERNÝ (RODIČOVSKÁ JEDNOTKA JE VYPNUTÁ)

- Rodičovskou jednotku opět zapněte stisknutím a **podržením** tlačítka Vypínače.
- Dobijte Rodičovskou jednotku.

BEZ NAPÁJENÍ

- Zkontrolujte nebo vyměňte baterie.
- Ujistěte se, že je monitor zapnutý.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY - ZÁRUKA

Angelcare® zaručuje původnímu majiteli tohoto produktu, že monitor Angelcare® je po dobu záruční lhůty bez vad materiálu a zpracování (určení záruky pro vaši zemi viz níže uvedená tabulka záruk). Pokud tento monitorovací systém nefunguje správně, pokud je používán podle pokynů za normálních podmínek a během záruční lhůty, Angelcare® produkt podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Obrátte se na Vašeho místního distributora a ověřte záruku a záruční lhůtu..

K produktu musí být přiložen doklad o nákupu, buď prodejní listina, nebo jiný důkaz, že monitorovací systém je v záruční době. Angelcare® ponese náklady na opravu nebo výměnu produktu a jeho odeslání zpět k vám.

Tato záruka se nevztahuje na produkt, který byl poškozen v důsledku neodborné údržby, nehody, nesprávného napájení nebo jakékoli jiné formy nesprávného použití. Záruka je rovněž neplatná, pokud vlastník produkt jakýmkoli způsobem opraví nebo upraví. Angelcare® nezodpovídá za žádné náhodné nebo následné škody v souvislosti s tímto výrobkem. Záruka rovněž vylučuje jakoukoli odpovědnost, která není uvedena výše. Žádná jiná záruka není poskytována.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství, které nejsou značkou Angelcare®, ani na žádné problémy, které vyplývají z použití, které není v souladu s pokyny k produktu, nedodržování pokynů k produktu, nebo problémy způsobené použitím příslušenství, částí nebo součástí, které nejsou dodává Angelcare.

ZÁKONY SE MOHOU LIŠIT. NĚKTERÉ ZEMĚ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

NEJSME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU.

DŮLEŽITÉ! This Angelcare® monitor monitor je produkt osobní péče. Tento produkt prosím nevracejte do obchodu. Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte svého distributora před vrácením tohoto produktu.

Informace o záruce vám poskytne váš místní distributor. Najděte místního distributora na naší webové stránce: **<https://international.angelcarebaby.com/>**

Warranty term per country	
UK, South Africa, Russia	1 year
Other countries	2 years

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dosah:

Otevřené pole (otevřená plocha bez překážek):

- Mezi Dětskou jednotkou a Rodičovskou jednotkou: do 250 metrů.
- Mezi Dětskou jednotkou a Snímací podložkou: do 6 metrů.

Pokyny pro teplotěr:

Alarm vysoké teploty: 22°C

Alarm nízké teploty: 16°C

Zdroj napájení:

2 AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky) nebo adaptéry 100-240 V AC / 5V DC 0,6A pro Dětskou jednotku.

2 AAA dobíjecí baterie a adaptéry 100-240 V AC / 5V DC 0,6A pro Rodičovskou jednotku.

1 baterie CR2450 3V pro bezdrátovou Snímací podložku

Pozor: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti.

Při nesprávné výměně baterií hrozí výbuch. Baterie v Rodičovské jednotce je uživatelsky vyměnitelná Li-ion dobíjecí baterie. Používejte pouze náhradní baterii doporučenou společností Angelcare. Chcete-li získat informace o náhradních bateriích, kontaktujte zákaznický servis Angelcare: **www.angelcarebaby.com** nebo kontaktujte místního distributora. Pokyny budou součástí náhradní baterie. Uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.

Baterie:

- NEMÍCHEJTE alkalické standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (NICD, NiMH atd.) Baterie.
- UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE NESPRÁVNÉHO TYPU.

ErP Compliance

POUŽÍVEJTE POUZE ZNAČKU ANGELCARE®

AC/DC NAPÁJECÍ SÍŤOVÉ ADAPTERY:

EU (VČETNĚ NĚMECKA) – MODEL: K05S050060G

UK – MODEL: K05S050060B

Přenosy:

Přenos mezi Dětskou jednotkou a Rodičovskou jednotkou probíhá na frekvenci 1,8 GHz pro Evropu / Asii / Afriku / Austrálii.

Přenos mezi Dětskou jednotkou a Snímací podložkou probíhá na frekvenci 2,4 GHz pro Evropu / Asii / Afriku / Austrálii

Maximální vysílaný RF výkon:

• 24dBm (250mW) mezi Dětskou a Rodičovskou jednotkou

• 4dBm (2.5mW) mezi Dětskou jednotkou a Snímací podložkou

RF kanálů mezi Dětskou a Rodičovskou jednotkou: 5

RF kanálů mezi Dětskou a Snímací podložkou: 79

Angelcare Monitors Inc. tímto prohlašuje, že tento chůvička je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **<https://angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>**

RF expozice - Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo limity pro vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) záření v EU pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad, nesmí být expozice člověka mateřské jednotce během normálního provozu menší než 20 cm.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbole koše na kolečkách znamenají, že v souladu s místními zákony a předpisy musí být váš produkt a / nebo jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Jakmile produkt / baterie dosáhne konce své životnosti, odnese je na sběrné místo určené místními úřady. Samostatná likvidace a recyklace pomůže chránit přírodní zdroje a chránit lidské zdraví a životní prostředí. Vyjmutí baterií najdete v Uživatelské příručce.

Značky shody specifické pro toto zařízení najdete na produktu.



Kontaktní informace

DŮLEŽITÉ! Tento monitor Angelcare® je produkt pro osobní péči. Tento produkt prosím nevracejte do obchodu. Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte svého distributora před vrácením tohoto produktu.

My v Angelcare® stojíme za všemi našimi výrobky. Pokud nejste zcela spokojeni nebo máte nějaké dotazy, obraťte se před vrácením tohoto produktu na distributora:

United States and Canada: Please contact us at: info@angelcarebaby.com

Other countries: Find your local distributor by visiting our website:
angelcarebaby.com/distributors

NÁVODY A VIDEO

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na **videa** a další funkce na našem webu.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Canada